


Style

スタイルナチュラル 取扱説明書 / Style Natural Instruction Manual

Style Natural 使用説明書 / Style Natural 사용설명서

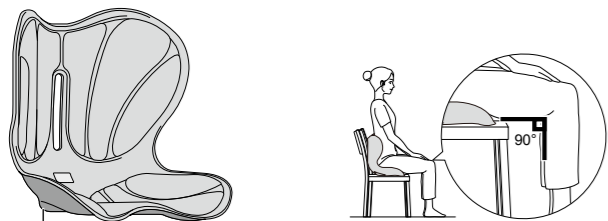

ストッパー
Stopper

ストッパーがある面を椅子の座面(または床など)に向けて使用してください。

Use the product with the surface that has the stopper facing down towards the seat of the chair (or the floor, etc.).

YSBC1J01IM00_ASML4W

使用目的：本品は座り姿勢をサポートする商品です。

⚠️ 安全上のご注意

次のような方は使用しないでください。

- 小さなお子様
- 身体の不自由な方
- 飲酒している方
- 意識がもうろうとしている方

次のような方は必ず医師にご相談のうえ、使用してください。

- 腰部ヘルニアや坐骨神経痛など腰や背中に疾患のある方
- 痔などの疾患のある方
- 本品が触れる部分に、傷や湿疹、腫れもの、化膿性疾患や過度の日焼けなど、皮ふの異常がある方
- 妊娠中の方、出産直後の方
- 骨粗しょう症など、骨に異常のある方
- 脊椎の骨折、肉離れなど急性（とう痛性）疾患のある方

上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 本品の上で立ち上がった時、本品を逆さにして使用したりしないでください。
- 故意に曲げないでください。
- 使用したまま仰向けにならないでください。
- 本来の用途目的以外では使用しないでください。

- 高温の場所や火気の近くで使用しないでください。
- 小さなお子様、ペットには使用させないでください。
- 本品が破損していたり、生地が破れたりした状態では使用しないでください。
- 分解や修理、改造などをしてしないでください。
- 使用中に痛み、かゆみ、かぶれなどの異常が現れたときは使用を中止してください。
- 1時間に1度は身体を軽く動かしてください。

⚠️ 使用上のご注意

- 本品は摩擦により、他のものに色移りしたり、シミができたりするおそれがあります。特に衣服などが濡れているときは、色移りしやすいので使用しないでください。
- 床や畳、ソファなどの材質によっては傷や色移りのおそれがあります。
- 不安定な場所、状態では使用しないでください。
- 開封時に若干素材のにおいがすることがあります。
- 本品は丸洗いできません。汚れは3～5%に希釈した中性洗剤液に浸した布をよく絞り、拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどでは拭かないでください。変形や変色の原因になります。
- 高温・多湿の場所（浴室、車中など）を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。

- 小さなお子様の手の届くところやペットの近くで保管しないでください。
- 廃棄時は、各自治体が指定している廃棄方法に従ってください。
- ヒップサイズが110cm以上の方は商品本来の機能が果たせない場合があります（製品の品質上は問題ありません）。

品番
Style Natural : YS-BE
原産国
中国
同梱品/付属品
本体(1)、
付属品：取扱説明書(1)



◀ Webでも取扱説明書をご覧ください



◀ Styleブランドの様々なプロダクト

株式会社 MTG
〒453-0041
愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13番
MTG 第2HIKARIビル
https://www.mtg.gr.jp

0120-315-332

●ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
(株)MTGは、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことがあります。また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

発行年月 2022/11 第1版

Purpose: This product is intended to help support your seated posture.

⚠️ Safety Precautions

You should not use this product if any of the following apply.

- If you are a small child
- If you have physical disabilities
- If you have been drinking alcohol
- If you are feeling groggy

Consult with a physician before use if any of the following apply.

- If you have a lumbar hernia or lumbar and back issues like sciatica
- If you have any issues like hemorrhoids
- If you have any skin abnormalities like injuries, eczema, swelling, purulent disease or excessive sunburn in areas this product will come into contact with
- Women who are pregnant or have just given birth
- If you have a bone disorder, such as osteoporosis
- If you have an acute (painful) condition, such as spine fractures, pulled muscles, etc.

Even if none of the conditions above apply to you, please consult with your physician if you have any concerns about using the product.

- Do not stand on the product or use

it upside down.

- Do not deliberately bend the product.
- Do not lie on your back while using the product.
- Do not use in any way except for its intended purpose.
- Do not use in a location that is hot or near fire.
- Do not allow small children or pets to use the product.
- Do not use the product if it is damaged or the fabric is torn.
- Do not disassemble, repair or modify the product.
- Cease use if any pain, itching, rashes or any other abnormal reactions occur during use.
- Engage in light movement once an hour.

⚠️ Precautions for Use

- There is a risk of color transfer to other items or staining due to friction. Color transfer is more likely to happen when clothing is wet, so do not use this product with wet clothes.
- There is a risk of damage and color transfer to floors, tatami mats, sofas, etc., depending on their material.
- Do not use the product in places or situations where it will be unstable.
- The material may have a slight odor


when the product is opened for the first time.

- The product cannot be washed as is. Wipe dirty areas with a damp cloth that has been soaked in a solution with a neutral detergent diluted to 3 - 5%.
- Do not wipe the product off with paint thinner, benzene, or alcohol. Using these may cause deformation or discoloration.
- When storing the product, avoid a hot or humid location (such as inside a car or bathroom) and keep it away from direct sunlight.
- Keep out of the reach of small children and store away from pets.
- Dispose of the product according to the regulations of your local government.
- This product may not perform its intended purpose to those with a hip measurement of 110 cm (43.30 in) or more (it is not a product quality problem).


Product number
Style Natural: YS-BE
Country of origin
China
Items included / Accessories
Main unit (1),
Accessories: Instruction manual (1)

Manufactured for MTG Co., Ltd.
MTG No.2 Hikari Bldg., 4-13 Honjin-dori,
Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 453-0041,
Japan
https://www.mtg.gr.jp

Publication Date: 2022/11 1st Edition

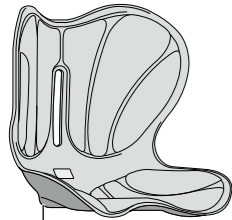

擋板 스토퍼

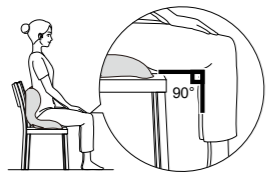

使用時請將有擋板的面朝向椅子的座面(或者地板)。

스토퍼가 있는 면을 의자의 앉는 면(또는 바닥 등)을 향하도록 하여 사용하십시오.

• 開始使用時, 請以 15 分鐘為大致標準, 從短時間開始嘗試。

• 坐下時請將腳掌緊貼在地板上, 使膝蓋的角度呈 90 度。

• 사용 시작 시에는 15분을 기준으로 짧은 시간 동안 시도해 보십시오.

• 무릎 각도가 90도가 되도록 다리의 뒷면을 확실하게 바닥에 대고 앉으십시오.

使用目的：本產品是支援坐立姿勢的產品。

⚠️ 安全注意事項

以下人士請勿使用本產品：

- 嬰幼兒
- 殘疾人士
- 飲酒後
- 意識模糊者

以下人士請務必向醫生諮詢後再使用本產品：

- 患有腰、背疾病如腰部疝氣或坐骨神經痛等人士
- 罹患痔瘡等疾病者
- 本產品觸碰到的部位有外傷、濕疹、腫塊、化膿性疾病、過度曬傷等皮膚異常者
- 懷孕中或於產後調理期的女性
- 骨骼異常, 患有骨質疏鬆等
- 患有脊椎骨折、肌肉拉傷等急症(疼痛性)者

其他對使用本產品存有疑慮的人士, 請在使用本產品前諮詢醫生。

• 請勿站在本產品之上, 或者將本產品倒置使用。

• 請勿故意彎曲本產品。

• 使用本產品時請勿仰臥。

• 請勿使用於產品用途以外的目的。

• 請勿在高溫或火源附近等環境下使用。

• 請勿讓嬰幼兒或寵物使用本產品。

• 在本產品破損、面料破裂的狀態下, 請勿使用。

• 請勿進行拆解、修理、改造等。

• 使用過程中, 肌膚若出現疼痛、痕癢或者出疹等異常情況, 請停止使用。

• 請每隔 1 小時輕輕翻動 1 次身體。

⚠️ 使用注意事項

• 本產品受摩擦後, 可能會造成染色到其他物品上或引起污漬。尤其是在衣服潮濕時, 請勿使用本產品, 因為很容易染色。

• 由於材質不同, 地板、榻榻米、沙發等有可能會發生刮擦或染色的情況。

• 請勿在不穩定的場所、狀態下使用。

• 開封時部分材質可能會產生異味。

• 本產品不可洗滌。如有污垢, 請用抹布浸泡至稀釋 3~5% 的中性洗滌液中, 然後充分擰乾, 將污垢擦拭乾淨。

• 請勿使用油漆稀釋劑、清潔劑或酒精等擦拭本體, 以免導致變形或變色等。

• 存放時應避免高溫、高濕度的環境(浴室、汽車內等), 放置於遠離日光直射處。

• 切勿保存於孩童伸手可及之處, 或寵物出沒位置附近。

• 廢棄時請遵守, 各地方政府指定的廢棄方式。

• 臀圍超過 110cm 的使用者, 可能無法達到本產品原有的功能(並非產品的品質問題)。

產品型號
Style Natural : YS-BE

生產地
中國

產品內容/配件
本體 (1)、
配件：使用說明書 (1)

製造商：株式會社 MTG
網址：https://www.mtg.gr.jp
聯絡地址：453-0041 日本愛知縣名古屋市中村區本陣通 4 丁目 13 番 MTG 第 2HIKARI 大樓

發行時間 2022/11 第 1 版

사용 목적: 본 제품은 앉은 자세를 서포트하는 상품입니다.

⚠️ 안전상 주의사항

다음에 해당하는 분은 사용하지 마십시오.

- 어린이
- 몸이 불편한 분
- 음주 상태인 분
- 의식이 흐릿한 분

다음에 해당하는 분은 의사와 상담 후 사용하십시오.

- 복부 탈장과 좌골신경통 등 복부와 등에 질환이 있는 분
- 치질 등의 질환이 있는 분
- 본 제품이 닿는 부분에 상처나 습진, 부종, 화농성 질환과 과도한 선탠 등 피부에 이상이 있는 분
- 임신 중이신 분, 출산 직후이신 분
- 골다공증 등 뼈에 이상이 있는 분
- 척추의 골절, 근육 당김 등 급성(통증성) 질환이 있는 분

위에 해당하지 않는 경우라도 사용하기에 불안한 경우는 미리 의사와 상담 후 사용하여 주십시오.

• 본 제품의 위에 올라가거나 거꾸로 하여 사용하지 마십시오.

• 고의로 굽히지 마십시오.

• 사용 중에 뒤로 젖혀 위를 보지 마십시오.

• 본래의 용도 목적 이외에는 사용하지 마십시오.

• 고온의 장소나 화기가 가까운 곳에서 사용하지 마십시오.

• 어린이와 애완동물에는 사용하지 마십시오.

• 본 제품이 파손되거나 옷감이 손상된 상태에서 사용하지 마십시오.

• 분해나 수리, 개조 등을 하지 마십시오.

• 사용 중에 통증, 가려움, 접촉성 피부염 등의 이상이 나타났을 때는 사용을 중지하십시오.

• 1시간에 한 번은 신체를 가볍게 움직이십시오.

⚠️ 사용상 주의사항

• 본 제품은 마찰로 인해 다른 제품에 물이 들거나 얼룩이 생길 우려가 있습니다. 특히 옷 등이 젖어 있을 때는 색이 물들기 쉬우므로 사용하지 마십시오.

• 바닥이나 소파 등 재질에 따라서는 스크래치가 생기거나 색이 물들 수 있습니다.

• 불안정한 장소나 상태에서는 사용하지 마십시오.

• 개봉 시에 약간 소에서 냄새가 날 수 있습니다.

• 본 제품은 전체를 세정할 수 없습니다. 오염은 3~5%로 희석한 중성세제액에 담근 천을 잘 짠 후에 닦아내십시오.

• 시너, 벤젠, 알코올 등으로 닦지 마십시오. 변형과 변색의 원인이 됩니다.

• 고온·다습한 장소(욕실, 자동차 내부 등)를 피하고 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

• 어린이의 손이 닿는 곳이나 반려동물 근처에 보관하지 마십시오.

• 폐기 시에는 각 지방자치단체가 지정한 폐기 방법에 따라 처리하십시오.

• 힘 사이즈가 110cm 이상인 분이 사용할 경우 본 제품의 기능이 제대로 발휘되지 못할 수 있습니다(제품 품질면의 문제는 없습니다).

품번
Style Natural : YS-BE

원산지
중국

동봉품/부속품
본체 (1),
부속품: 사용설명서 (1)

제조원 (주) 엠티지
453-0041 일본 아이치현 나고야시 나카무라구 혼진도모리 4-13
엠티지 제 2 히카리빌딩

발행년월 2022/11 제 1 판